

## Instrukcja zakładania maski AirFit P10



1. Przytrzymaj poduszki przy nosie, tak by wskaźnik wielkości poduszek znalazł się na dole, a wskaźniki stron — lewa (L) i prawa (R) — znajdowały się po właściwych stronach.




2. Naciągnij dolny pasek wokół tyłu głowy. Górny pasek powinien wygodnie spoczywać na czubku głowy.



3. Naciągnij mocowanie na głowę, przytrzymując dolny pasek.



4. Odciągnij maskę i ponownie przyłóż ją do twarzy. Upewnij się, że poduszki nosowe szczelnie przylegają do nozdrzy i są skierowane w górę.

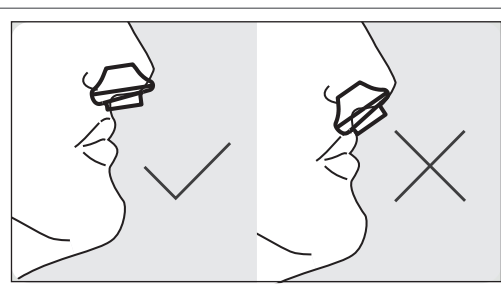

5. Na koniec podłącz końcówkę przewodu maski do przewodu powietrznego urządzenia i włącz urządzenie. Maska jest już gotowa do użycia.



Regulacja: Aby maska dobrze leżała, wystarczy wyregulować górne i dolne paski — zwiększyć odległość między nimi w celu poluzowania lub zbliżyć je do siebie w celu zwiększenia napięcia.

**Uwaga:** Szczegółowe instrukcje dla użytkownika można znaleźć w podręczniku użytkownika maski AirFit P10.

1 Badanie kliniczne FECS3 firmy ResMed. Dane ResMed (ciśnienie, przeciek, średnie dzienne użycie, wskaźnik AHI) uzyskane od grupy 21 uczestników.  
2 Badanie kliniczne FECS3 firmy ResMed. 90% uczestników było w stanie łatwo założyć maskę w mniej niż 30 sekund.  
3 Deklarowane dwucyfrowe wartości emisji hałasu (z marginesem błędów do 2 dbA) zgodnie z normą ISO 4871.

AirFit, QuickFit, QuietAir i Swift są znakami towarowymi firmy ResMed Ltd. Znak Swift jest zarejestrowany w Patent and Trademark Office (Urząd ds. Patentów i Znaków Towarowych) w USA. Specyfikacje mogą być zmieniane bez uprzedzenia. © 2013 ResMed Ltd. 1016916/2 2014-02



## Cichsza maska, która dopasowuje się do pacjenta

Maska z poduszkami nosowymi AirFit™ P10 należy do serii produktów AirFit firmy ResMed, które doskonale dopasowują się do pacjentów. Jest to najcichsza z dotychczas oferowanych przez nas masek, łącząca niezawodność i wydajność systemu Swift™ FX z konstrukcją, która jest o 50% cichsza i około 50% lżejsza.

### Cichsza

Odpowietrzacz QuietAir™ z tkanej siateczki jest niemal niesłyszalny (21,4 dBA<sup>3</sup>), dzięki czemu nie zakłóca snu pacjenta ani jego najbliższych.

### Lżejsza

Jest o niemal 50% lżejsza od naszej najpopularniejszej maski z poduszkami<sup>1</sup> i tak zaprojektowana, aby gwarantować wygodę snu.

### Łatwa do założenia

Elastyczne mocowanie na głowę QuickFit™ automatycznie dostosowuje się do głowy każdego pacjenta. Można je założyć w niecałe 30 sekund.<sup>2</sup>



# Ponad 40 minut dodatkowego snu ...

Niedawno przeprowadzone przez firmę ResMed badanie kliniczne<sup>1</sup> z udziałem 21 użytkowników aparatów CPAP z Australii wykazało, że pacjenci używający maski AirFit P10 firmy ResMed zamiast maski Swift FX spali przeciętnie o 40 minut dłużej każdej nocy.

Dodatkowe informacje o tym badaniu: [ResMed.com/AirFitP10](http://ResMed.com/AirFitP10)  
Dokument „Assessment of a new nasal pillows mask in patients receiving CPAP”.



## Cechy i zalety maski AirFit P10

**Elastyczne poduszki o działaniu amortyzującym** szczelnie przylegają do twarzy, nawet gdy pacjent obraca się w różnych kierunkach.

**Dwuwarstwowe poduszki** szczelnie przylegają do twarzy od razu po założeniu, delikatnie wprowadzają powietrze do nosa i są dostępne w różnych rozmiarach.

**Prosta konstrukcja** Maski AirFit P10 składa się tylko z trzech części, dzięki czemu można szybko i łatwo ją złożyć.

**Zintegrowany lekki przewód elastyczny** rozciąga się i zgina. Dzięki jego elastyczności i stabilności pacjent może spać w różnych pozycjach.

**Zawór QuietAir z siateczką z tkaniny** delikatnie rozprasza wydychane powietrze, dzięki czemu hałas nie zakłóca snu pacjenta ani jego najbliższych. Maski AirFit P10 to najcichsza maska firmy ResMed, działająca z głośnością 21,4 dBA.<sup>2</sup>

**Dopasowujące się do głowy mocowanie QuickFit** z precyzyjnym, dwupunktowym systemem regulacji na podstawie siły naprężenia i kierunku ustawienia pasków sprawia, że maska zawsze jest stabilnie zamocowana, a poduszki ściśle przylegają do nozdrzy. Dostępne w rozmiarze standardowym i mniejszym — do maski AirFit™ P10 dla kobiet.


## Elementy składowe maski AirFit P10



Maska AirFit P10 z podwójnym paskiem  
62935

Maska AirFit P10 dla kobiet z podwójnym paskiem  
62936 (mniejsza)

Sama oprawka  
62938

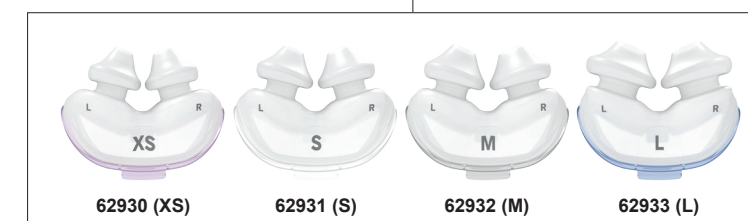

Poduszki

**XS** Bardzo mała  
**S** Mała  
**M** Średnia  
**L** Duża

### Kody produktów

	Europa 1	Europa 2	Europa 3
AirFit P10 — kompletny system*	62901	62902	62903
AirFit P10 dla kobiet — kompletny system**	62911	62912	62913

**Europa 1:** angielski (Wlk. Bryt.), francuski, niemiecki i włoski (Szwajcaria)

**Europa 2:** angielski, duński, fiński, norweski i szwedzki

**Europa 3:** angielski, czeski, niderlandzki (Belgia), francuski (Belgia), niemiecki (Belgia), grecki, węgierski, włoski, polski, LMSXS portugalski, rosyjski, słowacki, hiszpański i turecki

**Uwaga:** Szczegółowe instrukcje można znaleźć w podręczniku użytkownika maski AirFit P10.

\* Do maski są dołączone poduszki w rozmiarze S, M i L.

\*\* Do maski są dołączone poduszki w rozmiarze XS, S i M.

**AirFit™ P10**

Nasal pillows mask